


EndoDrill® GI Upper

Engångsinstrument för endoskopisk biopsering

BIBB
INSTRUMENTS

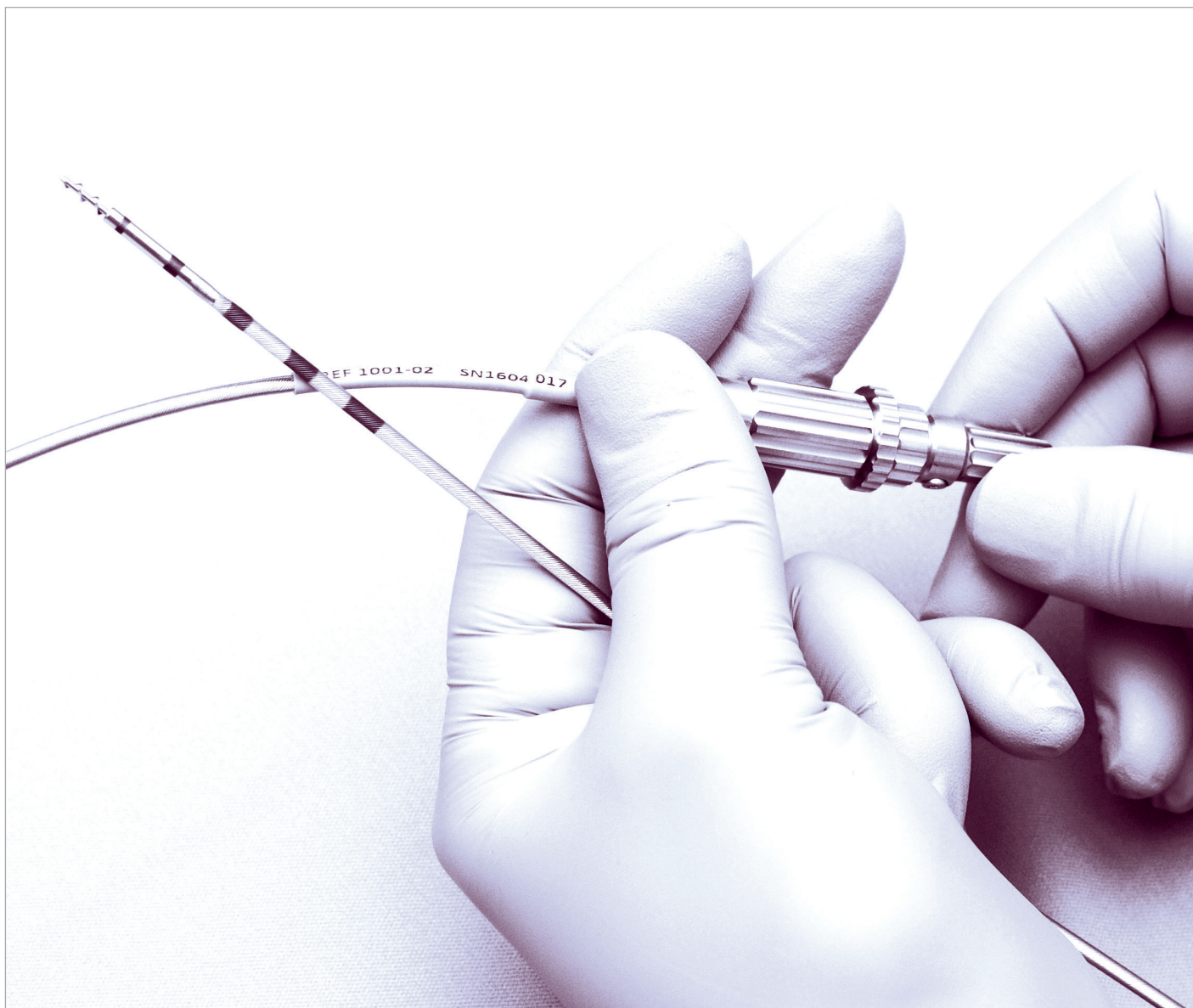

**En svensk innovation för
biopsering av submukösa samt
djupt belägna tumörer**

EndoDrill® GI Upper

Engångsinstrument för endoskopisk biopsering

BIBB
INSTRUMENTS


Egenskaper

- Flexibelt biopsi-instrument med borrarfunktion för provtagning av submukösa samt djupt belägna tumörer i övre gastrointestinalkanalen.
- Ergonomiskt handtag för utmärkt taktil kontroll.
- Instrumentet kan användas med eller utan endoskopiskt ultraljud.

Fördelar

En randomiserad, kontrollerad klinisk studie visar att EndoDrill® GI Upper ger signifikant större biopsier än konventionell biopsitång (Radial Jaw™ 4 Boston Scientific Corp) och signifikant större andel djup/submukös vävnad*.

- Biopsimaterial med möjlighet till optimal histopatologisk diagnostik.
- Det distinkta handtaget i metall möjliggör anpassning av borrens hastighet och tryck mot vävnaden vid biopsering.
- Längdsjusterare möjliggör inställning av borrdjup.

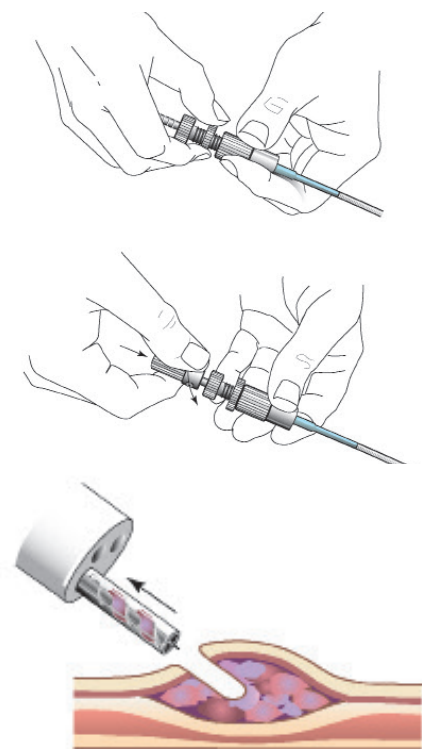

Beställningsinformation:



Typ A - Täta gängor för långsam vävnads-penetration.

Typ B - Glesare gängor för snabbare vävnads-penetration.

Artikelnamn	Artikel-nummer	Borrtyp	Arbetslängd (cm)	Min.arbetskanal Ø (mm)	Antal
EndoDrill® GI Upper, A	1001-01	5 gängor	155	2,8	1xA
EndoDrill® GI Upper, A (KIT)	1001-11	5 gängor	155	2,8	3xA
EndoDrill® GI Upper, B	1001-02	3 gängor	155	2,8	1xB
EndoDrill® GI Upper, B (KIT)	1001-12	3 gängor	155	2,8	3xB
EndoDrill® GI Upper, AB (KIT)	1001-13	Mix	155	2,8	2xA, 1xB
EndoDrill® GI Upper, BA (KIT)	1001-14	Mix	155	2,8	1xA, 2xB

Avsedd användning: EndoDrill® är ett kirurgiskt engångsinstrument avsett att via flexibel endoskopi, i övre gastrointestinalkanalen, ta vävnadsprover för histologisk undersökning.

BiBBInstruments är certifierat i enlighet med ISO 13485:2012. EndoDrill® GI Upper är CE-märkt i enlighet med MDD 93/42/ECC Annex II exklusive sektion 4.

*Walther C, Jeremiasen M, Rissler P, Johansson JL, Larsson MS, Walther BS. A New Method for Endoscopic Sampling of Submucosal Tissue in the Gastrointestinal Tract: A Comparison of the Biopsy Forceps and a New Drill Instrument. Surg Innov. 2016 Dec;23(6):572-580.

BiBB Instruments AB
Medicon Village
SE-223 81 Lund, Sweden
Ordering Information
info@bibbinstruments.com
www.bibbinstruments.com